


Enxerto Arterial Tubular Orgânico

Tubo Valvulado 300 Corrugado

Experiência

Qualidade

Performance

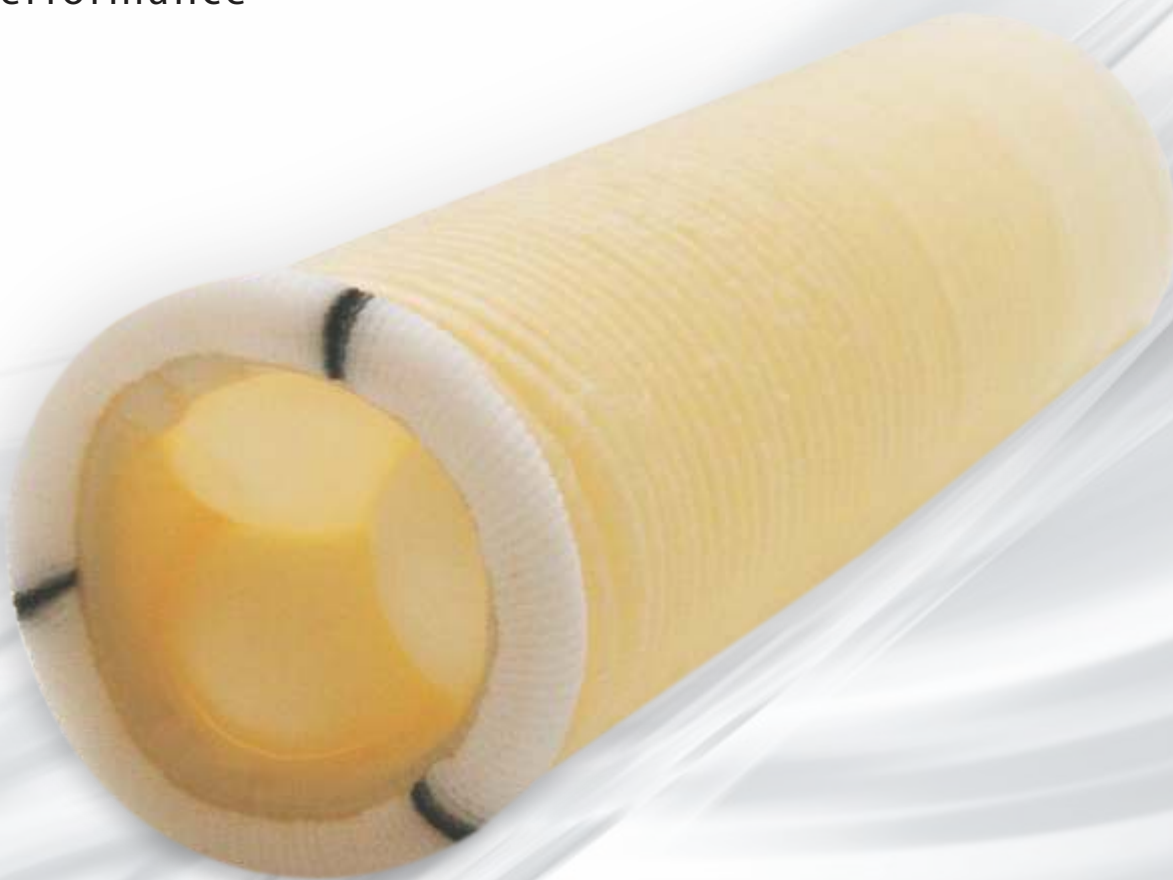


www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: O Enxerto Arterial Tubular Orgânico Tubo Valvulado 300 Corrugado é constituído de pericárdio bovino, moldado em suporte especial, tratado com glutaraldeído e conservado em formaldeído a 4%. Este tratamento confere-lhe características adequadas de resistência, flexibilidade e ausência de antigenicidade.

Indicação: O Enxerto Arterial Tubular Orgânico Tubo Valvulado 300 Corrugado é indicado em correções de aneurismas da aorta ascendente com insuficiência valvar.

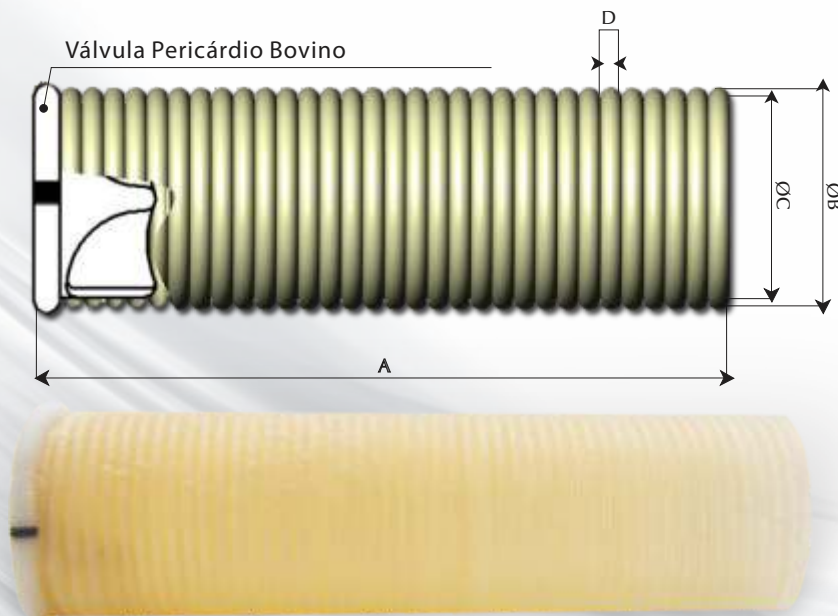

Especificações Técnicas (mm)

Tamanho	A ± 10	ØB ± 0,5	ØC ± 1,0	D ± 0,5	Válvula	Código
25	120	27	25	1,7	Ø25	11556
27	120	29	27	1,7	Ø27	11563
29	120	31	29	1,7	Ø29	11570
31	120	33	31	1,7	Ø31	11587
33	120	35	33	1,7	Ø33	11594

O tamanho do tubo é especificado pelo Ø da válvula.

Informações de Desempenho

Diâmetro	Grad. Médio de Pressão (mmHg)	Área Efetiva do Orifício (cm ²)
25	4,73	2,38
27	3,00	2,55
29	1,53	3,08
31	1,32	3,63
33	0,56	3,88



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 CNPJ: 52.828.936/0001-09
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
 Registro ANVISA nº 10159030024
 www.braile.com.br

BRAILE
BIOMÉDICA