


Enxerto Arterial Tubular Orgânico

Tubo Valvulado 300 Liso

Experiência

Qualidade

Performance

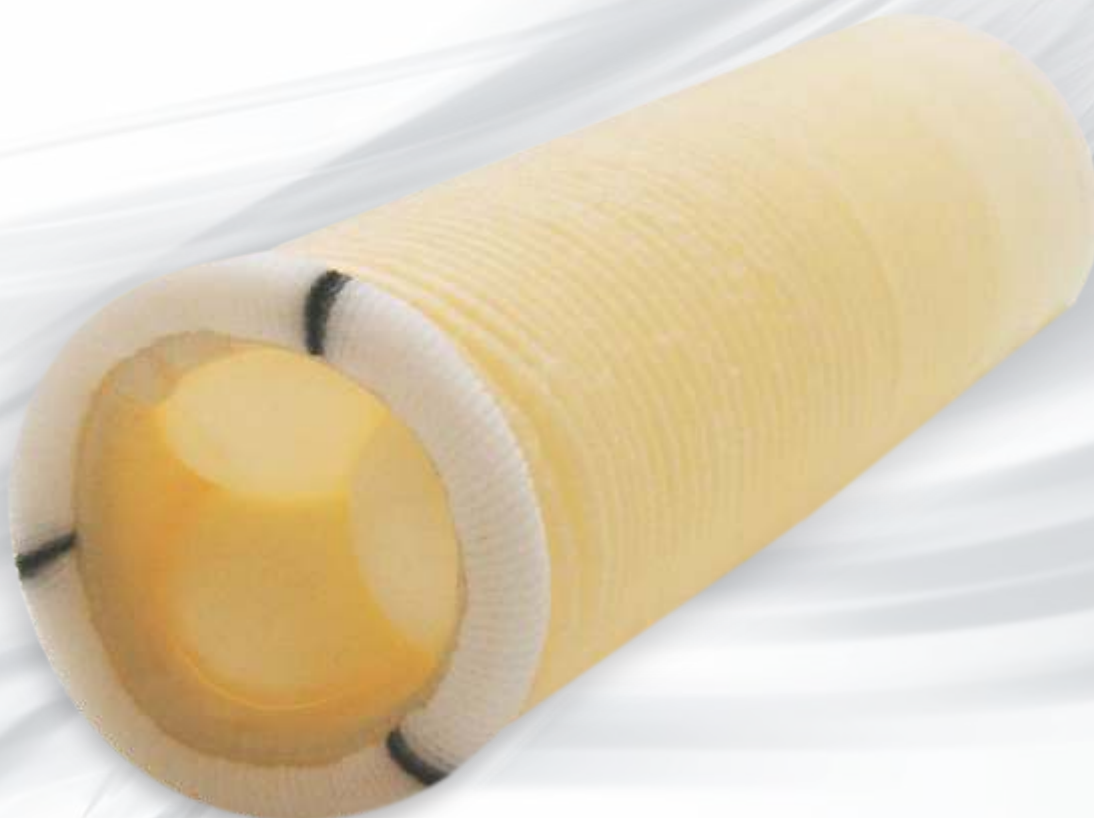


www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: O Enxerto Arterial Tubular Orgânico Tubo Valvulado 300 Liso é constituído de pericárdio bovino tratado com glutaraldeído e conservado em formaldeído a 4%. Este tratamento confere-lhe características adequadas de resistência, flexibilidade e ausência de antigenicidade.

Indicação: O Enxerto Arterial Tubular Orgânico Tubo Valvulado 300 Liso é indicado em correções de aneurismas da aorta ascendente com insuficiência valvar.

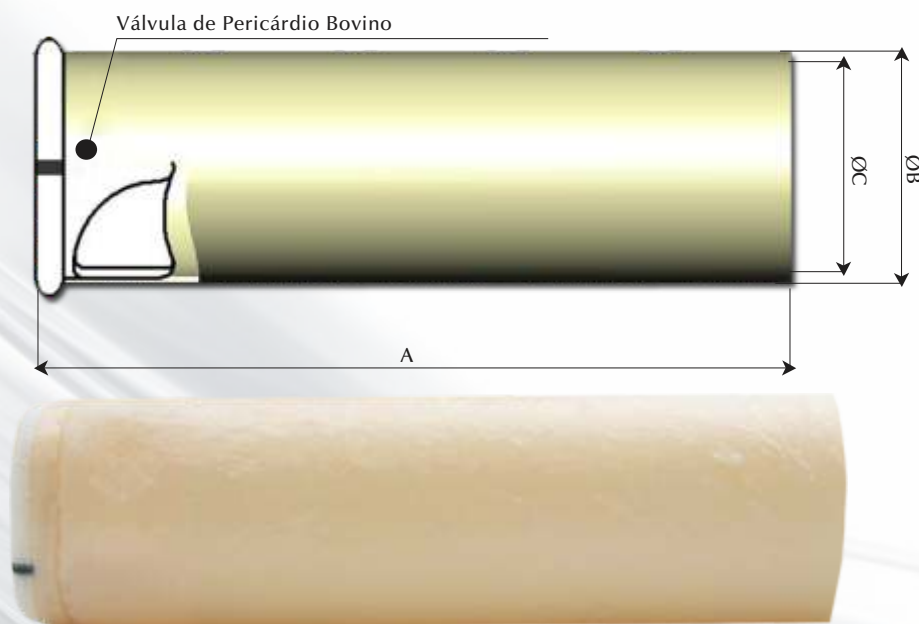

Especificações Técnicas (mm)

Tamanho	A ± 10	ØB ± 0,5	ØC ± 0,5	Válvula	Código
25	120	27	25	Ø25	10935
27	120	29	27	Ø27	10942
29	120	31	29	Ø29	10959
31	120	33	31	Ø31	10966
33	120	35	33	Ø33	10973

O tamanho do tubo é especificado pelo Ø da válvula.

Informações de Desempenho

Diâmetro	Grad. Médio de Pressão (mmHg)	Área Efetiva do Orifício (cm ²)
25	4,73	2,38
27	3,00	2,55
29	1,53	3,08
31	1,32	3,63
33	0,56	3,88



Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 CNPJ: 52.828.936/0001-09
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
 Registro ANVISA nº 10159030024
 www.braille.com.br

BRAILE[®]
 BIOMÉDICA