

Prótese Valvular Orgânica Biológica Porcina

Experiência

Qualidade

Performance




www.braile.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA

Descrição: A Prótese Valvular Orgânica Biológica Porcina é constituída de cúspides de valvas aórticas suínas, tratadas com glutaraldeído e preservadas com formaldeído a 4%. Este tratamento confere-lhe características adequadas de resistência, flexibilidade e ausência de antigenicidade. A bioprótese é confeccionada sobre um suporte de poliacetal revestido com pericárdio bovino, sobre o qual são montadas as cúspides porcinas previamente tratadas. Um fio especial de aço inoxidável, inserido externamente no anel de suporte, reforça a consistência da base do anel e permite identificar a posição da bioprótese no paciente por simples exame radiológico.

Indicação: A Prótese Valvular Orgânica Biológica Porcina é indicada para substituição da Valva Mitral, Aórtica, Tricúspide ou Pulmonar.

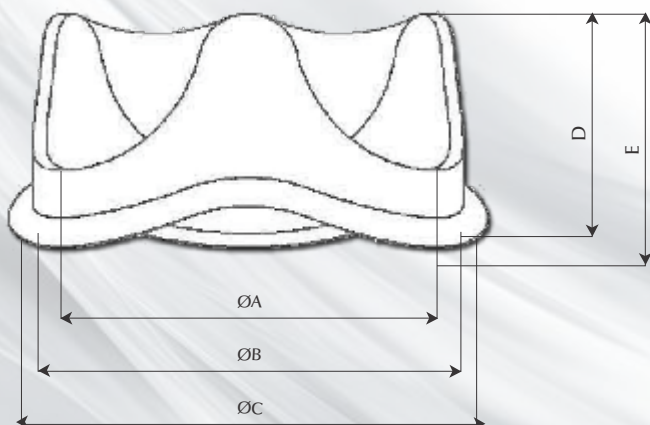

Especificações Técnicas:

Tamanho	ØA ± 0,5	ØB ± 0,5	ØC ± 1,0	D ± 0,5	E ± 0,5	Código Aórtico	Código Mitral	Grad. Médio de Pressão (mmHg)	Área Efetiva do Orifício (cm ²)
19	15	19	23	9	12	8431	-	7,28	1,22
21	17	21	25	9	12	8444	-	3,88	1,62
23	19	23	27	10	13	8457	-	3,25	1,87
25	21	25	29	11	14	8473	101408	4,73	2,38
27	23	27	31	11	14	8514	101417	3,00	2,55
29	25	29	33	12	15	8527	101426	1,53	3,08
31	27	31	35	13	16	-	8530	1,32	3,63
33	29	33	37	13	16	-	8556	0,31	3,74
35	31	35	39	14	17	-	8572	0,29	4,13



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
 CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
 Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
 CNPJ: 52.828.936/0001-09
 Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
 Registro ANVISA nº 10159030027
 www.braile.com.br

BRAILE
 BIOMÉDICA